

# Filmsafe M/ D

**Ein neuartiger, sicherer Aufbewahrungsplatz  
für Ihr unbelichtetes Filmmaterial**



**Vorteile:**

- Entnahme der Filme nur bei Dunkelkammerlicht möglich.
- Elektronische Helligkeitskontrolle steuert die Verriegelung des FILM SAFE.
- Keine Vorbelichtung des Filmmaterials in der Dunkelkammer.
- Absolut sicherer Aufbewahrungsplatz für das Filmmaterial.
- Einfache Handhabung, keine Wartung.

**Techn. Daten:**

Material: ABS schwarz  
Gewicht: 3600 g  
Filmformate: 18 x 24 und 15 x 30 cm

Maße: 395 x 330 x 195 mm  
Aufstellung: Tischmodell  
Netzanschluß: 230 V sec. 9 V

**Filmsafe D:** Schutz durch 0,1 mm Pb  
zur Aufbewahrung im Röntgenraum  
strahlengeschützt durch Blei

**Preis: € 569,-**

**Filmsafe M:**  
zur Aufbewahrung in der  
Dunkelkammer ohne Bleischutz

**Preis: € 499,-**

Preise netto zzgl. MwSt.!

Pro Auftrag erheben wir eine Versandpauschale von € 6,-.

**Inbetriebnahme:**


FILM SAFE in der Dunkelkammer aufstellen und mit dem Netz verbinden. Bei Betätigung des gelben Druckschalters öffnet sich FILM SAFE unter Dunkelkammerlicht. ( Wenn rotes Licht am Druckschalter aufleuchtet, ist das Licht in der Dunkelkammer zu hell und FILM SAFE bleibt verriegelt.) Achtung: Klappe ist so konstruiert, daß sie immer wieder durch Eigengewicht schließt. Bei hellem Licht ist ein Öffnen des Safes und Entnahme von Filmen unmöglich.

Bestellfax: 0800-859 78 90 (kostenfrei)  
 aus Österreich: 0049-89-859 78 90  
 Servicetelefon: 089-859 65 39  
 aus Österreich: 0049-89-859 65 39

Internetshop: [www.christiansengmbh.de](http://www.christiansengmbh.de)  
 Email: [info@christiansengmbh.de](mailto:info@christiansengmbh.de)

# Strahlenschutzschild für intraorale Aufnahmen

Preisliste gültig ab Mai 2012, freibleibend

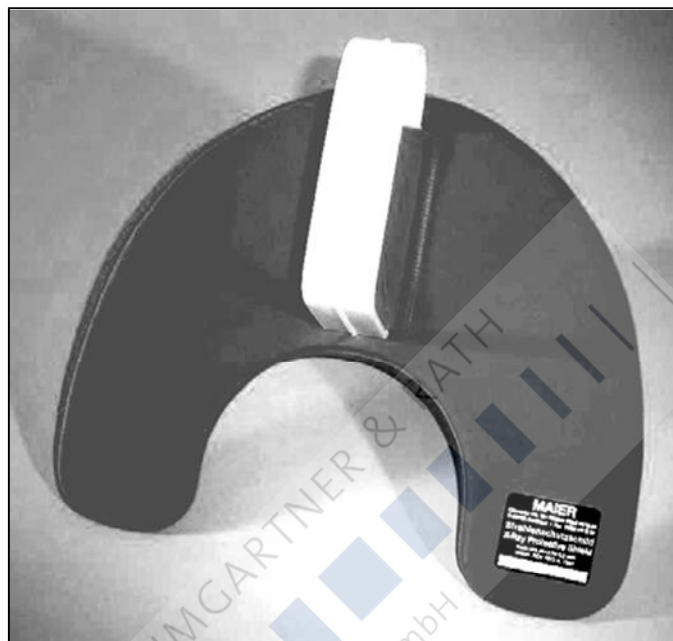


## **! so klein wie möglich - nur so groß, wie notwendig !**

Der Maier-Strahlenschutzschild ist der DIN6813 entsprechend gestaltet und mit einer Bleieinlage von 0,5mm versehen.

**Er fängt das Nutzstrahlenbündel bei intraoralen Röntgenaufnahmen mit Sicherheit auf!**

- leicht zu reinigen durch abnehmbaren Griff und glatte Oberflächen
- handlich und leicht durch geringe Größe
- praktisch und einfach in der Anwendung
- problemlos abzulegen und zu verstauen
- passende Wandhalterung als Zubehör

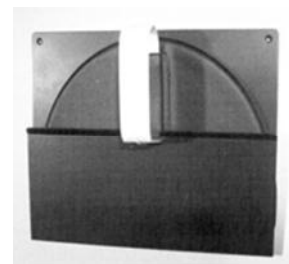

Strahlenschutzschild SS4 - standard	olivgrün	57,90
Strahlenschutzschild SS4 - color	weiß, schwarz, gelb, pink, lila, rot, grün, dkl.grün, blau, hellblau, silber	62,90
Wandhalterung - standard	Plexiglas, durchsichtig	54,90
Wandhalterung - spezial	Aluminium, RAL-Farben wählbar	83,90

### Zahlungs- und Lieferbedingungen:

Preise netto in EUR freibleibend zzgl. Mwst. Für Österreich und übriges EU-Ausland: Mit Umsatzsteueridentifikationsnr. (ATU-Nr.) keine Mwst.-Berechnung. Zahlung ohne Abzug innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Ware. Pro Auftrag erheben wir EUR 6,- für Versand und Verpackung, sonst entstehen keine Kosten. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum. Rücksendung innerhalb von 8 Tagen nur in originalverschlossenen, wiederverkaufsfähigen Verpackungen. Stand Mai 2012, freibleibend.